

Installation Manual

RadiForce® MX191

Color LCD Monitor

Important

Please read this Installation Manual, and “Instructions for Use” (separate volume) carefully to familiarize yourself with safe and effective usage.

- Please refer to the “Instructions for Use” for basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
- The latest Installation Manual is available for download from our web site:

<http://www.eizoglobal.com>



This product has been adjusted specifically for use in the region to which it was originally shipped. If operated outside this region, the product may not perform as stated in the specifications.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO Corporation. EIZO Corporation is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO Corporation's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.


CONTENTS

CONTENTS	3		
Chapter 1 Basic Operations and Functions	4		
1-1. Basic Adjustment Menu Operations.....	4		
● Displaying the Adjustment Menu	4		
● Modifying the Setting	4		
● Displaying the Function Name	4		
● Storing the Setting/Exiting the Adjustment Menu	4		
1-2. Functions	5		
Chapter 2 Adjusting Screens	7		
2-1. Compatible Resolutions	7		
2-2. Setting the Resolution	7		
● Windows 10.....	7		
● Windows 8.1/Windows 8/Windows 7	7		
● Windows Vista.....	7		
● OS X Mountain Lion (10.8) and later.....	7		
● Mac OS X 10.7	8		
2-3. Adjusting Color	8		
● Selecting the Display Mode (CAL Switch Mode).....	8		
● Performing Advanced Adjustments	8		
● Adjustable Settings in Each Mode	9		
● Adjusting Brightness	9		
● Adjusting Contrast.....	10		
● Adjusting Temperature	10		
● Adjusting Gamma.....	11		
● Adjusting Gain.....	11		
● Adjusting Hue	12		
● Adjusting Saturation	12		
2-4. Adjusting Screens	13		
● Digital Signal Input	13		
● Analog Signal Input.....	13		
2-5. Adjusting Sharpness	16		
Chapter 3 Setting Monitor	17		
3-1. Setting Language.....	17		
3-2. Displaying or Hiding the EIZO Logo	17		
3-3. Locking Operation Buttons	18		
3-4. Resetting to Default.....	19		
● Resetting the Color Adjustments	19		
● Resetting All Adjustments to Defaults.....	19		
Chapter 4 Power Saving Functions	20		
4-1. Power Saving Mode	20		
● Digital Signal Input	20		
● Analog Signal Input.....	20		
4-2. Setting Power Indicator Display.....	20		
4-3. Setting Auto Brightness Adjustment of the Monitor.....	21		
4-4. Setting Auto Power-Off Function of the Monitor	21		
Chapter 5 Troubleshooting	22		
5-1. No Picture	22		
5-2. Imaging Problems (for both digital and analog).....	23		
5-3. Imaging Problems (for digital only)	23		
5-4. Imaging Problems (for analog only)	24		
5-5. Other Problems	24		
5-6. USB Problems	24		
Chapter 6 Reference	25		
6-1. Attaching Arm	25		
6-2. Connecting Multiple PCs	26		
● Switching among Input Signals.....	26		
● Setting Input Signal Switching Procedure	27		
6-3. Showing Monitor Information.....	27		
6-4. Main Default Settings	28		
6-5. Preset Timing	29		
LIMITED WARRANTY	30		


Chapter 1 Basic Operations and Functions

1-1. Basic Adjustment Menu Operations


● Displaying the Adjustment Menu

Pressing the function button to change the setting or pressing  allows you to display the adjustment menu.

When pressing the input signal selection, mode or brightness control

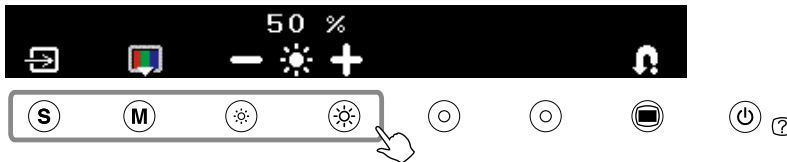

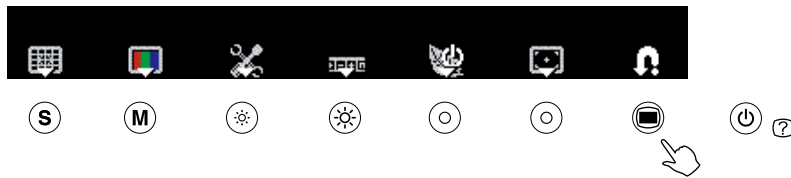


When pressing the menu button




● Modifying the Setting

The operation methods differ depending on the icons.


Display example	Operation method
	As for the icons displayed with the +/- marks, selecting + allows you to increase the setting value or selecting - to decrease it.
	Selecting the icon displayed with ▾ mark allows you to show the next menu.
	The Enable/Disable setting is toggled by selecting the icon. X is displayed when the function is invalid.

● Displaying the Function Name

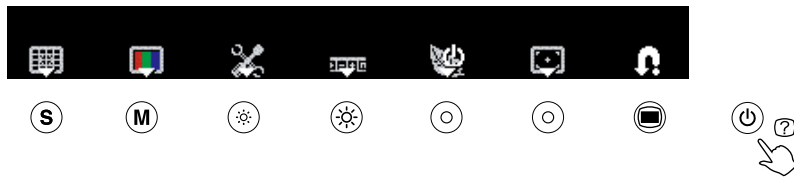

1. Press  while the adjustment menu is displayed.

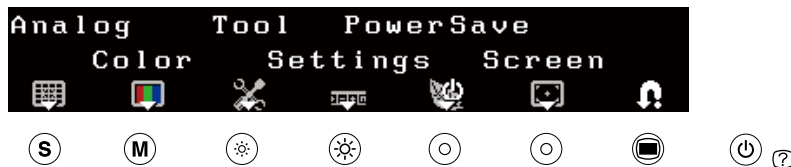

2. The function name is displayed.



● Storing the Setting/Exiting the Adjustment Menu

After completing the setting, selecting  allows you to store the setting. Selecting  repeatedly allows you to close the adjustment menu.

Note



- The adjustment menu automatically finishes if no input operations occur within 45 seconds.

1-2. Functions

The following table shows setting items of the adjustment menu.

Icon	Function	Overview
	-	Determines the setting. Selecting the icon repeatedly allows you to close the adjustment menu.
Analog		
	AutoSize	Flickering, screen position, and screen size are adjusted automatically. Returns to the pre-adjusted status. Determines the adjustment.
	AutoRange	Every color gradation (0 to 255) can be displayed by adjusting the signal output level. Returns to the pre-adjusted status. Determines the adjustment.
	Manual	Performs advanced adjustment when the automatic adjustment fails. Adjust the clock, phase and position, in this order.
	Clock	Eliminates vertical bars.
	Phase	Removes flickering or blurring.
	Position	Corrects the screen position Use to adjust the position.
Color		
	Color Menu	Independent setting and saving of color adjustment are available for each CAL Switch mode.
	Mode*	Selects the best display mode easily according to monitor's application. Each time you press the button, the mode is switched.
	Brightness	Adjusts the screen brightness. Adjustable range: 0 to 100 %
	Contrast	Adjusts the contrast. Adjustable range: 0 to 100 %
	Gain	Determines the mixing rate of red, green and blue, and adjust the color tone. Adjustable range: 0 to 100 % Allows you to determine the mixing rate of red. Allows you to determine the mixing rate of green. Allows you to determine the mixing rate of blue.
	Advanced	Adjusts each function of hue and saturation.
	Hue	The hue can be adjusted. If you set the hue to a high value, the image turns greenish. If low, the image turns purplish. Adjustable range: -100 to 100

Icon	Function	Overview
	Saturation	The color saturation can be adjusted. Adjustable range: -100 to 100
	Temperature	The color temperature can be adjusted. The gain preset values are set for each color temperature setting value. Adjustable range: Native, 6500K-15000K (specified by every 500K unit, including 9300K), User (at gain adjustment)
	Gamma	Gamma can be adjusted. Adjustable range: 1.8, 2.0, 2.2
Tools		
	Info1	Displays the input signal status (analog/digital), resolution, H/V frequency.
	Info2	Displays the model name, usage time and serial number.
	Input Signal	Sets to detect the input signal automatically. The Auto/Manual setting is toggled by selecting the icon.
	Reset	Resets the adjustment values to the factory settings. Attention • After resetting, you cannot undo the operation. All: Resets all adjustments to the default settings (factory settings). Color (CUS*): Only the adjustment values in the current CAL Switch mode will revert to the default settings (factory settings).
Menu Settings		
	Language	A language for the Adjustment menu and messages can be selected. The language setting is toggled by selecting the icon.
Power Save		
	Auto EcoView	The sensor on the front side of the monitor detects the environmental brightness to adjust the screen brightness automatically and comfortably by using the Auto EcoView function. The Enable/Disable setting is toggled by selecting the icon.
	Power LED	This function allows you to set the power indicator (blue) ON/OFF in the monitor ON condition. The On/Off setting is toggled by selecting the icon.

Icon	Function	Overview
	Off Timer	This function allows the monitor to automatically turn off after a specified time has passed. This function serves to protect the monitor from after-images caused when the same image is left displayed for a long time. Use this function when an image is displayed throughout the day. Adjustable range: Off, 1 to 23h
Screen		
	Sharpness	This function allows you to emphasize the outline of the image by emphasizing the color difference between the pixels composing the image and to improve a sense of quality and materiality. Contrarily, this function allows you to show the image smoothly by blurring the outline of the image.

*1 The name of the current CAL Switch mode is displayed.

Chapter 2 Adjusting Screens

2-1. Compatible Resolutions

For compatible resolutions of this product, refer to Instruction for Use "Compatible Resolutions".

2-2. Setting the Resolution

● Windows 10

1. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
2. From the displayed menu, click "Display Settings".
3. On the "Customize your display" dialog box, click "Advanced display settings".
4. Select a monitor, then choose a resolution from the "Resolution" pull-down menu.
5. Click the "Apply" button.
6. When a confirmation dialog box is displayed, click "Keep changes".

● Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

1. For Windows 8.1 / Windows 8, click the "Desktop" tile on the Start Screen to display the desktop.
2. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
3. From the displayed menu, click "Screen Resolution".
4. On the "Screen Resolution" dialog box, select the monitor.
5. Click "Resolution" to select the desired resolution.
6. Click the "OK" button.
7. When a confirmation dialog box is displayed, click "Keep changes".

● Windows Vista

1. Right-click the mouse anywhere on the desktop except for icons.
2. From the displayed menu, click "Personalize".
3. On the "Personalization" window, click "Display Settings".
4. On the "Display Settings" dialog box, select the "Monitor" tab and select desired resolution in the "Resolution" field.
5. Click the "OK" button.
6. When a confirmation dialog box is displayed, click "Yes".

● OS X Mountain Lion (10.8) and later

1. Select "System Preferences" from the Apple menu.
2. When the "System Preferences" dialog box is displayed, click "Displays". (For Mac OS X Mountain Lion (10.8), click "Displays" for "Hardware".)
3. On the displayed dialog box, select the "Display" tab, then choose "Change" for "Resolutions".
4. The list of selectable resolutions is displayed. Select the desired resolution.
If the desired resolution is not displayed in the list, hold down the Option key and select "Change".
5. Your selection will be reflected immediately. When you are satisfied with the selected resolution, close the window.

● Mac OS X 10.7





1. Select “System Preferences” from the Apple menu.
2. When the “System Preferences” dialog box is displayed, click “Displays” for “Hardware”.
3. On the displayed dialog box, select the “Display” tab and select desired resolution in the “Resolutions” field.
4. Your selection will be reflected immediately. When you are satisfied with the selected resolution, close the window.

2-3. Adjusting Color




● Selecting the Display Mode (CAL Switch Mode)

A desired mode can be selected easily according to the monitor application.

Display Modes

Mode	Purpose
 (DICOM-CL)	DICOM-CL mode. Available for setting tailored to X-ray film color (clear base).
 (TXT)	Text mode. Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.
 (CUS)	Custom mode. Available for the color settings according to your preference.
 (CAL)	CAL mode. Displays the screen adjusted by calibration software.

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Press  again while the adjustment menu is displayed.
Each time you press the button, the mode is switched.
3. Select .
The mode selected is set.

←→ DICOM-CL → TXT → CUS → CAL →


Note

- You can also select the CAL Switch mode by pressing  and select  (Color).

● Performing Advanced Adjustments

Independent setting and saving of color adjustment are available for each CAL Switch mode.

Attention

- It takes about 30 minutes for the performance of electrical parts to stabilize. Please wait 30 minutes or more after the monitor power has been turned on or the monitor has recovered from the power saving mode, and then adjust the monitor.
- Perform  (AutoRange) first when adjusting color for analog input signals. (See “To adjust color gradation automatically” (page 16).)
- The same image may be seen in different colors on multiple monitors due to their monitor-specific characteristics. Make fine color adjustment visually when matching colors on multiple monitors.








Note

- The values shown in “%” or “K” are available only as reference.

● Adjustable Settings in Each Mode

According to the CAL Switch mode selected, the adjustable function differs. (You cannot select any non-adjustable or non-settable function.)

√: Adjustable, - : Unadjustable

Icon	Function	CAL Switch mode			
		DICOM-CL	TXT	CUS	CAL
	Brightness	-	√	√	-
	Contrast	-	√	√	-
	Temperature	-	√	√	-
	Gamma	-	√	√	-
	Gain	-	-	√	-
	Saturation	-	-	√	-
	Hue	-	-	√	-

*1 If you adjust the calibration in this mode using the calibration kit exclusive for to this monitor (see RadiCS LE /“Accessories” in the “Instructions for Use”), only “Brightness” and “Color Reset” are adjustable.







● Adjusting Brightness

The screen brightness is adjusted by changing the brightness of the backlight (light source from the LCD back panel).

Setting Range

0 to 100 %

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Adjust the brightness with  or  of  (Brightness).
4. Select .
The adjustment is completed.

Note

- You can also adjust the brightness by pressing  or  while the adjustment menu is not displayed.







● Adjusting Contrast

The luminance of the screen is adjusted by varying the video signal level.





Setting Range

0 to 100 %

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Adjust the contrast with  or  of  (Contrast).
4. Select .
The adjustment is completed.

Note

- You can also adjust the contrast by pressing  while the adjustment menu is not displayed, and press  or  of  (Contrast).
 - At a contrast level of 50 %, every color gradation is displayed.
 - When adjusting the monitor, users are recommended to adjust the brightness, which may not downgrade the gradation characteristics, prior to adjusting the contrast. Perform the contrast adjustment in the following cases.
 - If you think the screen is dark even when the brightness level is set to 100 %
 - If you think the black level of the screen is bright (Reduce the brightness level and set the contrast level above 50 %)
-

● Adjusting Temperature

The color temperature can be adjusted.








The color temperature is normally used to express the hue of “white” and/or “black” by a numerical value. The value is expressed in degrees “K” (Kelvin).

The screen becomes reddish at a low color temperature, and bluish at a high color temperature, like the flame temperature. The gain preset values are set for each color temperature setting value.

Setting Range

Native, 6000K - 15000K (specified by every 500K unit, including 9300K), User (at gain adjustment)

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Select  (Color Menu).
4. Adjust the color temperature with  or  of  (Temperature).
5. Select .
The adjustment is completed.

Note

- “Gain” allows you to perform more advanced adjustments (refer to [“Adjusting Gain” \(page 11\)](#)).
 - If you set “Native”, the image is displayed in the preset color of the monitor (Gain: 100 % for each RGB).
 - When gain is changed, the color temperature is changed to “User”.
-








● Adjusting Gamma

Gamma can be adjusted. The brightness of the monitor varies depending on the input signal, however, the variation rate is not proportional to the input signal. To keep the balance between the input signal and the brightness of the monitor is called as “Gamma correction”.

Setting Range

1.8, 2.0, 2.2

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Select  (Color Menu).
4. Adjust the gamma value with  or  of  (Gamma).
5. Select .
The adjustment is completed.











● Adjusting Gain

The brightness of each color component red, green, and blue is called Gain. You can change the hue of “white” by adjusting gain.

Setting Range

0 to 100 %

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Select  (Color Menu).
4. Select  (Gain).
5. Adjust the respective value of  (Red)/  (Green)/  (Blue) with  or .
6. Select .
The adjustment is completed.

Note

- The value of gain changes with that of color temperature.
 - When gain is changed, the color temperature is changed to “User”.
-









● Adjusting Hue

The hue can be adjusted. If you set the hue to a high value, the image turns greenish. If low, the image turns purplish.

Setting Range

-100 to 100

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Select  (Color Menu).
4. Select  (Advanced).
5. Adjust the hue with  or  of  (Hue).
6. Select .
The adjustment is completed.

Attention

- After this adjustment, some color gradations may not be displayed.
-









● Adjusting Saturation

The color saturation can be adjusted.

Setting Range

-100 to 100

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Color).
3. Select  (Color Menu).
4. Select  (Advanced).
5. Adjust the saturation with  or  of  (Saturation).
6. Select .
The adjustment is completed.

Attention

- After this adjustment, some color gradations may not be displayed.
-

Note

- The minimum value (-100) changes the screen to monochrome.
-

2-4. Adjusting Screens

● Digital Signal Input

When digital signals are input, images are displayed correctly based on the preset data of the monitor, but if you perform more advanced adjustment, see ““2-3. Adjusting Color” (page 8)” and subsequent pages.

● Analog Signal Input

Attention

- It takes about 30 minutes for the performance of electrical parts to stabilize. Please wait 30 minutes or more after the monitor power has been turned on or the monitor has recovered from the power saving mode, and then adjust the monitor.
- The Self Adjust (automatic screen adjustment) function does not work for the images under the resolution of 800 × 600 (SVGA).
- The self adjustment and auto adjustment functions work correctly when an image is fully displayed over the Windows or Macintosh display area. They do not work properly in the cases below:
 - when an image is displayed only on a part of the screen (command prompt window, for example)
 - when a black background (wallpaper, etc.) is in useAlso, these functions cannot work properly in some graphic boards.

The monitor screen adjustment is used to suppress flickering of the screen or adjust screen position and screen.

Note

- The self adjustment function works when all of the following conditions are satisfied:
 - When a signal is input into the monitor for the first time or when a resolution or vertical/horizontal scan frequency not used before is set.






If the screen is not displayed correctly even after performing the self adjustment operation, adjust the screen according to the procedures on the following pages to use the monitor comfortably.

How to Set

1. Perform the auto adjustment.

● To adjust flickering, screen position, and screen size automatically

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Analog).
3. Select  (AutoSize).
Flickering, screen position, and screen size are adjusted automatically.
4. After confirming the screen message, select  (OK).
If you select  (Undo), the monitor returns to the pre-adjusted status.

If the screen is not displayed correctly even after performing Auto Adjustment, perform the adjustments according to the procedures on the following pages. If the screen is displayed correctly, go to “5. Adjusting color gradation.” (page 16).

2. Prepare to use analog screen adjustment patterns.

Download the “Screen adjustment pattern files” from our site: <http://www.eizoglobal.com>

Note


- For details and instructions on opening the “Screen adjustment pattern files”, refer to the Readme.txt file.
-






3. Perform the auto adjustment again with the analog screen adjustment pattern displayed.

● To adjust flickering, screen position, and screen size automatically

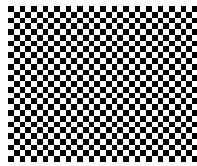Procedure

1. Display Pattern 1 in full screen on the monitor using the “Screen adjustment pattern files”.



2. Press .
The adjustment menu appears.
3. Select  (Analog).
4. Select  (AutoSize).
Flickering, screen position, and screen size are adjusted automatically.
5. After confirming the screen message, select  (OK).
If you select  (Undo), the monitor returns to the pre-adjusted status.

If the screen is not displayed correctly even after performing Auto Adjustment, perform the adjustments according to the procedures on the following pages. If the screen is displayed correctly, go to “5. Adjusting color gradation.” (page 16).


4. Choose from the adjustment menu to perform advanced adjustments.

Select  (Manual) to adjust the clock, phase and position, in this order.

● To eliminate vertical bars

Procedure

1. Adjust the clock with  or  of  (Clock) to eliminate vertical bars.

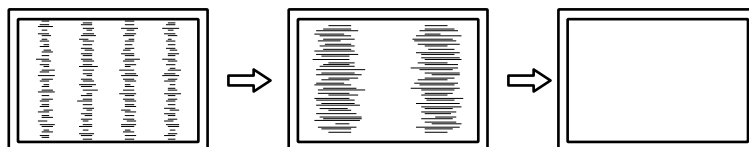


Note

- Press the control button slowly so as not to miss the adjustment point.
 - When blurring, flickering or bars appear on the screen after adjustment, proceed to “To remove flickering or blurring”.
-

● **To remove flickering or blurring**

Procedure

1. Adjust the phase with **−** or **+** of  (Phase) to remove flickering or blurring.

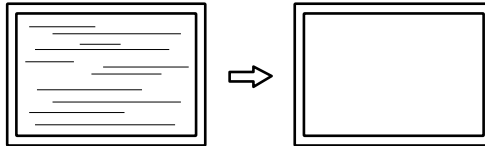

Attention


- Flickering or blurring may not be eliminated depending on your PC or graphics board.
-

● **To correct the screen position**

Note


- Since the number of pixels and the pixel positions are fixed on the LCD monitor, only one position is provided to display images correctly. The position adjustment is made to shift an image to the correct position.
-

Procedure

1. Select  (Position).
2. Adjust the position with **←** (Left) / **→** (Right) / **↓** (Down) / **↑** (Up) to display the image properly in the display area of the monitor.

3. Select .

The adjustment is completed.

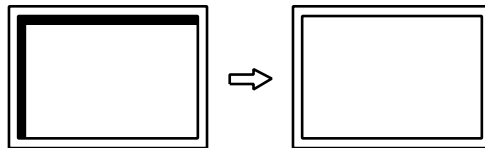

Note

- When vertical bars appear on the screen after adjustment, go back to “To eliminate vertical bars”. (Clock → Phase → Position)
-

4. Close Pattern 1.


5. Adjusting color gradation.






● To adjust color gradation automatically

Every color gradation (0 to 255) can be displayed by adjusting the signal output level.

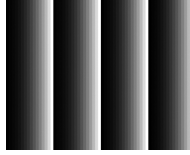Procedure

1. Display Pattern 2 in full screen on the monitor using the “Screen adjustment pattern files”.



2. Press .
The adjustment menu appears.
3. Select  (Analog).
4. Select  (AutoRange).
Color gradation is adjusted automatically.
5. After confirming the screen message, select  (OK).
If you select  (Undo), the monitor returns to the pre-adjusted status.
6. Close Pattern 2.







2-5. Adjusting Sharpness

This function allows you to emphasize the outline of the image by emphasizing the color difference between the pixels composing the image and to improve a sense of quality and materiality. Contrarily, this function allows you to show the image smoothly by blurring the outline of the image.

Adjustable range

-3 to 3

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Screen).
3. Adjust the sharpness with  or  of  (Sharpness).
4. Select .
The adjustment is completed.

Chapter 3 Setting Monitor




3-1. Setting Language

A language for the Adjustment menu and messages can be selected.


Selectable languages

English/German/French/Spanish/Italian/Swedish/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Japanese

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Settings).
3. The language setting is switched by selecting  (Language).




	English
	German
	French
	Spanish
	Italian
	Swedish
	Simplified Chinese
	Traditional Chinese
	Japanese

4. Select .
The language selected is set.

3-2. Displaying or Hiding the EIZO Logo

The EIZO logo can be displayed or hidden.

Procedure

1. Press  to turn off the monitor.
2. Hold down  and press  to turn on the monitor.
The EIZO logo display setting is toggled by performing the operation in step 2.

3-3. Locking Operation Buttons





The settings can be locked to prevent them being changed.




There are two types of locks: “Key Lock” and “Menu Lock”.

Key Lock: Locks buttons other than the Power button.

Menu Lock: Locks buttons other than the Power, Input, and Mode buttons.

Procedure

1. Press  to turn off the monitor.
2. Hold down  and press  to turn on the monitor.
The adjustment menu appears.
3. Each time you press , the mode is switched.

	Unlock
	Menu Lock
	Key Lock

4. Select .
The mode selected is set.

Attention

- The key lock function is also activated when calibration is performed using RadiCS/RadiCS LE.
-

3-4. Resetting to Default

There are two different Resets: Color Reset for only resetting the color adjustments to the default settings and All Reset for resetting all settings to the defaults.

Attention

- After resetting, you cannot undo the operation.






Note

- Regarding the default setting, see “6-4. Main Default Settings” (page 28).
-

● Resetting the Color Adjustments

Only the color adjustment value for the current CAL Switch mode can be reset to the default settings.






Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Tool).
3. Select  (Reset).
If you will not perform the reset operation, select .
4. Select  (Color (CUS*¹)).
The color adjustment values revert to the default settings.
*1 The name of the current CAL Switch mode is displayed.

● Resetting All Adjustments to Defaults

All adjustments are reset to the default settings.

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Tool).
3. Select  (Reset).
If you will not perform the reset operation, select .
4. Select  (All).
All setting values revert to the default settings.

Chapter 4 Power Saving Functions

4-1. Power Saving Mode

Attention

- When not using the monitor, you can disconnect the power plug so that the power is completely cut.
- Five seconds before the monitor enters the power saving mode, it displays a preliminary message.

● Digital Signal Input

This monitor complies with the DVI DMPM standard.

Power Saving System

The monitor enters the power saving mode after five seconds in connection with the PC setting.

PC	Monitor	Power Indicator
On	Operation mode	Blue
Power saving mode	Power saving mode	Orange

Resumption Procedure

Operate the mouse or keyboard to resume the normal screen operations.

● Analog Signal Input

This monitor complies with the VESA DPM standard.

Power Saving System

PC	Monitor	Power Indicator
On	Operation mode	Blue
Power saving mode	STAND-BY SUSPENDED Off	Orange




Resumption Procedure



Operate the mouse or keyboard to resume the normal screen operations.

4-2. Setting Power Indicator Display

This function allows you to set the power indicator (blue) ON/OFF in the monitor ON condition.

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (PowerSave).
3. The On/Off setting is toggled by selecting  (Power LED).

	On
	Off

4. Select .
The mode selected is set.




4-3. Setting Auto Brightness Adjustment of the Monitor



The sensor on the front side of the monitor detects the environmental brightness to adjust the screen brightness automatically and comfortably by using the Auto EcoView function.


Attention

- This function is not available in the DICOM-CL or CAL modes.

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (PowerSave).
3. The Enable/Disable setting is toggled by selecting  (Auto EcoView).

	Enable
	Disable

4. Select .
The mode selected is set.








4-4. Setting Auto Power-Off Function of the Monitor

This function allows the monitor to automatically turn off after a specified time has passed. This function serves to protect the monitor from after-images caused when the same image is left displayed for a long time. Use this function when an image is displayed throughout the day.

Adjustable range

Off, 1 - 23h




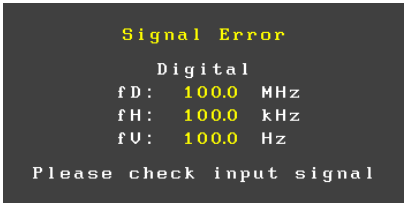

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (PowerSave).
3. Set a monitor OFF time with  or  of  (Off Timer).
Select "Off" to set Off timer setting to "Off".
4. Select .
The mode selected is set.
5. "The power will turn off soon." one minute before the setting time.
If you select  (Extend), the off timer function works 90 minutes later.

Chapter 5 Troubleshooting

If a problem still remains after applying the suggested remedies, contact your local EIZO representative.

5-1. No Picture

Problem	Possible cause and remedy
<p>1. No picture</p> <ul style="list-style-type: none"> Power indicator does not light. Power indicator lights blue. Power indicator is lighting orange. 	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the power cord is connected properly. Press . Increase "Brightness", "Contrast" and "Gain" in the adjustment menu (see "Performing Advanced Adjustments" (page 8)). Switch the input signal with . Move the mouse or press any key on the keyboard. Check whether the PC is turned on.
<p>2. The message below appears.</p> <ul style="list-style-type: none"> This message appears when no signal is input. Example:  <ul style="list-style-type: none"> The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. (Such frequency is displayed in yellow.) Example:  <p>fD: Dot clock (Displayed only during digital signal input) fH: Horizontal scan frequency fV: Vertical scan frequency</p>	<p>This message appears when the signal is not input correctly even when the monitor functions properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on. Check whether the PC is turned on. Check whether the signal cable is connected properly. Switch the input signal with . Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor (see "Compatible Resolutions" in the "Instructions for Use"). Reboot the PC. Select an appropriate setting using the graphics board's utility. Refer to the manual of the graphics board for details.




5-2. Imaging Problems (for both digital and analog)

Problem	Possible cause and remedy
1. The screen is too bright or too dark.	<ul style="list-style-type: none">• Use “Brightness” and “Contrast” in the adjustment menu to adjust it. (The LCD monitor backlight has a limited life span. When the screen becomes dark or begins to flicker, contact your local EIZO representative.)
2. Characters are blurred.	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor (see “Compatible Resolutions” in the Instructions for Use).
3. Afterimages appear.	<ul style="list-style-type: none">• Afterimages are particular to LCD monitors. Avoid displaying the same image for a long time.• Use the screen saver or power saving function to avoid displaying the same image for extended periods of time.
4. Green/red/blue/white dots or defective dots remain on the screen.	<ul style="list-style-type: none">• This is due to LCD panel characteristics and is not a failure.
5. Interference patterns or pressure marks remain on the screen.	<ul style="list-style-type: none">• Leave the monitor with a white or black screen. The symptom may disappear.
6. The outlines of the letters are colored.	<ul style="list-style-type: none">• If the [Sharpness] setting is set to a high level, the characters displayed on the monitor may be colored.

5-3. Imaging Problems (for digital only)

Problem	Possible cause and remedy
1. Noise appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none">• When entering the signals of HDCP system, the normal images may not be displayed immediately.
2. The auto adjust function does not work correctly.	<ul style="list-style-type: none">• This function does not work when a digital signal is input.

5-4. Imaging Problems (for analog only)

Problem	Possible cause and remedy
<p>1. Display position is incorrect.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Use "Position" in the Adjustment menu to correct the image position (see "To correct the screen position" (page 15)). If the problem persists, use the graphics board's utility if available to change the display position.
<p>2. Vertical bars appear on the screen or a part of the image is flickering.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Use "Clock" in the Adjustment menu to adjust it (see "To eliminate vertical bars" (page 14)).
<p>3. Whole screen is flickering or blurring.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Use "Phase" in the Adjustment menu to adjust it (see "To remove flickering or blurring" (page 15)).
<p>4. The auto adjust function does not work correctly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> This function is intended for use on a Macintosh and on AT-compatible PC running Windows. It may not work properly in either of the following cases. It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (command prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use. This function does not work correctly with some graphics boards.

5-5. Other Problems

Problem	Possible cause and remedy
<p>1. The adjustment menu does not appear.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the operation lock function is active (see "3-3. Locking Operation Buttons" (page 18)).

5-6. USB Problems

Problem	Possible cause and remedy
<p>1. A monitor connected with a USB cable is not identified.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the USB cable is connected properly. Reboot the PC. Check whether the PC and its OS are USB compliant. (For USB compliance of the respective devices, consult their manufacturers.) For Windows, check the PC's BIOS setting for USB. (Refer to the manual of the PC for details.)

Chapter 6 Reference

6-1. Attaching Arm

An optional arm (or an optional stand) can be attached by removing the stand section. For supported optional arms (or optional stands), refer to the EIZO website: <http://www.eizoglobal.com>

Attention

- When attaching an arm or stand, follow the instructions of their User's Manual.
- When using another manufacturer's arm or stand, confirm the following in advance and select one conforming to the VESA standard.
 - Clearance between the screw holes: 100 mm × 100 mm
 - Strong enough to support weight of the monitor unit (except the stand) and attachments such as cables.
- When using another manufacturer's arm or stand, use the following screws to secure it.
 - Screws supplied with this product (M4 × 12 mm)
- When using an arm or stand, attach it to meet the following tilt angles of the monitor.
 - Up 45 degrees, down 45 degrees (landscape, and portrait display rotated 90 degrees clockwise)
- Connect the cables after attaching an arm or stand.
- Do not move the removed stand up and down. Doing so may result in injury or device damage.
- The monitor and arm or stand are heavy. Dropping them may result in injury or equipment damage.
- When setting the monitor to the portrait style, turn the monitor screen 90° in clockwise direction.

Procedure


1. Lay the LCD monitor on a soft cloth spread over on a stable surface with the panel surface facing down.

2. Remove the stand.

Prepare a screwdriver. Loosen the screws (four) securing the unit and the stand with the screwdriver.

3. Attach the arm or stand to the monitor.


Use screws supplied with this product.

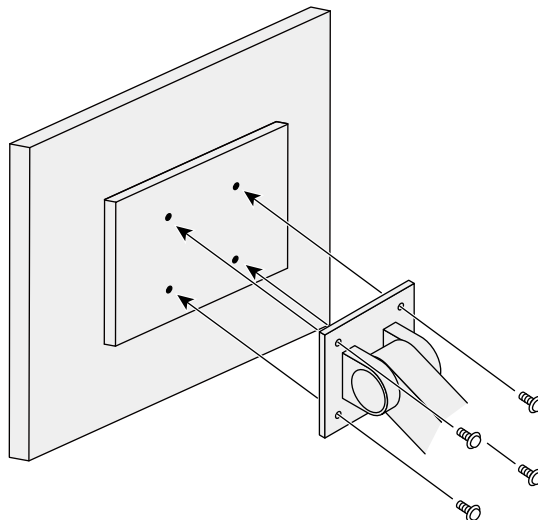

6-2. Connecting Multiple PCs

The product has multiple connections to PCs and allows you to switch to one of the connections for display.

Connection examples

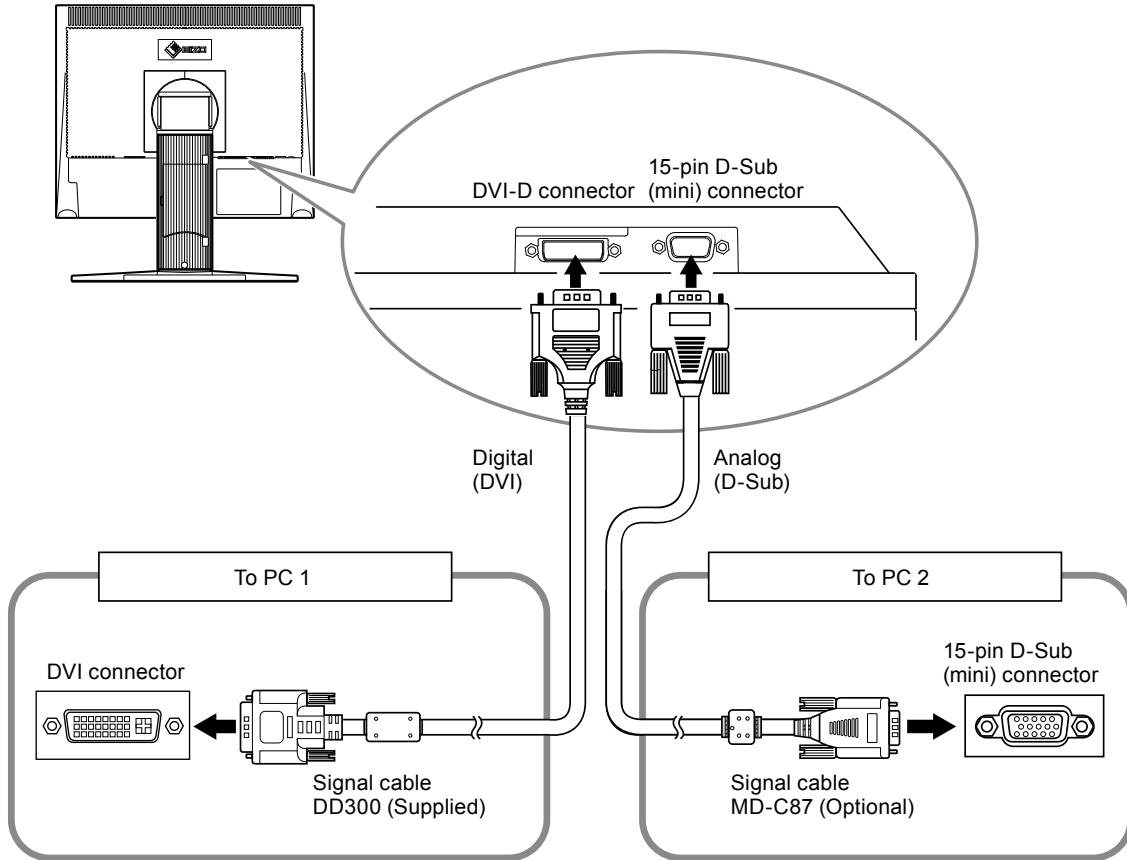


● Switching among Input Signals


Procedure

The input signal switches each time **(S)** is pressed.

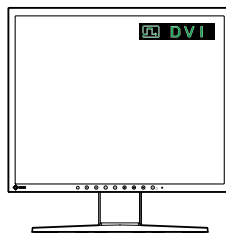


When the signal is switched, the active input port name appears at the top right corner of the screen.






● Setting Input Signal Switching Procedure

Setting	Function
Auto	The monitor recognizes the connector through which PC signals are input. When a PC is turned off or enters the power saving mode, the monitor automatically displays another signal.
Manual	The monitor displays the signal from the selected connector despite the signal input. Select an active input signal with  .

Procedure

1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Tool).
3. The Auto/Manual setting is toggled by selecting  (Input Signal).

	Auto
	Manual

4. Select .
The mode selected is set.

Note

- If you select "Auto", the monitor enters the power saving mode after all the PCs have entered the power saving mode or have been switched off.






6-3. Showing Monitor Information

This function allows you to display the input signal status, current resolution and model name.

Info1: Displays the input signal status (analog/digital), resolution, H/V frequency.

Info2: Displays the model name, usage time and serial number.

Procedure





1. Press .
The adjustment menu appears.
2. Select  (Tool).
3. Select  (Info1) or  (Info2).
4. Select .
The menu is closed.

6-4. Main Default Settings

CAL Switch Mode: The default display setting is DICOM-CL.

Mode	Brightness	Temperature	Gamma value
DICOM-CL	170 cd/m ²	7500K	DICOM
Text	approx. 100 cd/m ²	7500K	2.2
Custom	approx. 300 cd/m ²	Native	2.2
CAL	170 cd/m ²	7500K	DICOM

Others

Auto EcoView		Disable
Off Timer		Disable
Input Signal		Auto
Languages		English
Sharpness		0

6-5. Preset Timing

The following table shows factory preset analog signal timing.

Attention

- Display position may be deviated depending on the PC connected, which may require screen adjustment using Adjustment menu.
- If a signal other than those listed in the table is input, adjust the screen using the Adjustment menu. However, screen display may still be incorrect even after the adjustment.
- When interlace signals are used, the screen cannot be displayed correctly even after screen adjustment using the Adjustment menu.

Resolution	Frequency	
	Horizontal: kHz	Vertical: Hz
640 × 400	24.83	56.42
640 × 400	31.48	70.10
640 × 480	31.47	59.94
640 × 480	37.86	72.81
640 × 480	37.50	75.00
720 × 400	31.47	70.09
800 × 600	35.16	56.25
800 × 600	37.88	60.32
800 × 600	48.08	72.19
800 × 600	46.88	75.00
1024 × 768	48.36	60.00
1024 × 768	56.48	70.07
1024 × 768	60.02	75.03
1152 × 864	67.50	75.00
1280 × 960	60.00	60.00
1280 × 1024	63.98	60.02
1280 × 1024	79.98	75.03

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “**EIZO**”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “**Distributors**”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “**Warranty**”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “**Original Purchaser**”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “**Product**”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “**User’s Manual**”).

The period of this Warranty is limited to (i) five (5) years from the date of purchase of the Product; or, limited to the expiration of (ii) 30,000 hours of its use of the Product (hereinafter referred to as the “**Warranty Period**”); provided, however, that the Warranty Period for the LCD panel of the Product is limited to three (3) years from the date of purchase of the Product. EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts (excluding design parts) of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards. If the unit cannot be repaired due to its condition or the stockout of a relevant part, EIZO and Distributors may offer the replacement by a product with equivalent performance instead of repairing it.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of the sensor;
- (d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (e) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
- (g) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User’s Manual, etc.); and
- (h) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet); die Garantiefrist für das LCD-Panel des Produkts ist jedoch auf drei (3) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts beschränkt. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

Nach Ablauf von sieben (7) Jahren nach Ende der Produktion solcher Teile werden EIZO und Vertriebshändler keine Teile (mit Ausnahme von Konstruktionsteilen) mehr vorhalten und lagern. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden. Wenn das Gerät aufgrund seines Zustands oder eines Fehlbestands bei einem entsprechenden Teil nicht repariert werden kann, können EIZO und Vertriebshändler statt der Reparatur des Geräts den Austausch gegen ein Produkt mit gleichwertiger Leistung anbieten.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors;
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (g) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (h) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est limitée à (i) cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit ou à (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »), sous réserve, toutefois, que la Période de Garantie du panneau LCD du Produit est limitée à trois (3) ans à partir de la date d'achat du Produit. EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de conserver ou de stocker des pièces (à l'exception des pièces de conception) du Produit à l'expiration d'une période de sept (7) ans après l'arrêt de la production de ces pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité. Si l'unité ne peut pas être réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (g) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (h) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “EIZO”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “Distribuidores”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “Garantía”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “Comprador original”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “Producto”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “Manual del usuario”).

El periodo de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) a 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el “Periodo de Garantía”); con la exclusión, no obstante, de que el periodo de garantía del panel LCD del Producto está limitado a tres (3) años a partir de la fecha de compra del Producto. EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni para con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus distribuidores dejarán de tener o almacenar cualquier pieza del producto (excepto piezas del diseño) una vez expirado el periodo de siete (7) años después de que hayan dejado de fabricarse tales piezas. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad. Si no se puede reparar la unidad debido a su estado o si se han agotado las existencias de una pieza importante, EIZO y sus distribuidores podrían ofrecerle sustituirlo por un producto con rendimiento equivalente en lugar de repararlo.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
- (c) Cualquier deterioro del sensor;
- (d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
- (g) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).
- (h) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**EIZO**”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Distributori**”) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Garanzia**”) all’acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Acquirente originale**”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Prodotto**”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Manuale utente**”).

La presente Garanzia è limitato a (i) cinque (5) anni a partire dalla data d’acquisto del Prodotto; o, limitato (ii) allo scadere di 30.000 ore d’utilizzo del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Periodo di Garanzia**”); tenendo però presente che il Periodo di garanzia del pannello LCD del Prodotto è limitato a tre (3) anni dalla data d’acquisto del Prodotto. EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i distributori cesseranno lo stoccaggio dei componenti (tranne le parti relative al progetto) del prodotto dopo sette (7) anni dall’interruzione della produzione di tali componenti. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità. Se l’unità non può essere riparata a causa delle sue condizioni o dell’esaurimento scorte di un componente rilevante, EIZO e i distributori potrebbero offrire la sostituzione con un prodotto con prestazioni equivalenti piuttosto ripararlo.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
- (c) Qualsiasi deterioramento del sensore;
- (d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (g) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell’utente, ecc.).
- (h) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L’Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L’ACQUIRENTE ORIGINALE. L’ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "**EIZO**") och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "**Distributörer**") garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad "**Garantin**") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "**Ursprunglige köparen**") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad "**Produkten**") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "**Bruksanvisning**").

Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta inträffar tidigare, begränsat till utlöpanget av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (häri kallad "**Garantiperioden**"). Garantiperioden för Produktens LCD-panel är dock begränsad till tre (3) år från datumet för Produktens inköp. EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och dess leverantörer slutar lagerföra delar (utom designdelar) till produkten sju (7) år efter att delen i fråga slutar tillverkas. När skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder. Om enheten inte kan repareras på grund av skicket eller att en del inte finns i lager kan EIZO och dess leverantörer erbjuda sig att byta ut produkten mot en produkt med likvärdig prestanda istället för att reparera den.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
- (c) Alla försämringar av sensorn;
- (d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).
- (e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
- (g) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (h) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»), με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Περίοδος Εγγύησης για την οθόνη LCD του Προϊόντος περιορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι διανομείς της θα πάψουν να διατηρούν αποθέματα εξαρτημάτων (εκτός από τα εξαρτήματα σχεδιασμού) του προϊόντος μόλις περάσουν επτά (7) χρόνια αφότου διακοπεί η παραγωγή των εν λόγω εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

- (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομέων,
- (β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,
- (γ) Любое повреждение датчика;
- (δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),
- (ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,
- (στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,
- (ζ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και
- (η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “EIZO”) и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “Дистрибуторы”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “Гарантия”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “Первоначальный покупатель”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “Продукт”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “Руководство пользователя”).

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта, или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”), при условии, что Гарантийный период для панели ЖКД ограничен сроком три (3) года от даты приобретения Продукта. EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

Компания EIZO и ее дистрибуторы хранят детали изделия (за исключением деталей внешней конструкции) не более 5 (пять) лет после прекращения его выпуска. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества). Если устройство невозможно отремонтировать из-за его состояния или отсутствия нужной детали, то вместо ремонта компания EIZO и ее дистрибуторы могут предлагать замену неисправного устройства на устройство с аналогичными характеристиками.

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика;
- (г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (з) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“**EIZO**”)和 EIZO 授权的经销商 (以下简称“**经销商**”), 接受并依照本有限责任保证书 (以下简称“**保证书**”)之条款, 向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品 (以下简称“**产品**”)的原买方 (以下称“**原买方**”)提供保证: 在保证期内 (规定如下), 如果原买方发现按本产品所附使用说明书 (以下简称“**用户手册**”)所述方式正常使用本产品过程中, 本产品出现故障或损坏, EIZO 和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为 (i) 自本产品购买之日起的五 (5) 年期间或限定为到达 (ii) 使用本产品 3 万小时的期限 (以下简称“**保证期限**”), 但本产品的液晶显示屏 (LCD) 的保证期限定为自本产品购买之日起的三 (3) 年期间。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关的任何责任或义务。

零件停产七 (7) 年后, EIZO 及其经销商不再保留或保存产品的任何零件 (设计零件除外)。维修显示器时, EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。若由于自身条件或缺少相关零件而不能修理设备, EIZO 和经销商可提供性能相同的更换产品, 而无需维修。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定, 对于任何下列情况之一, EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 传感器的任何劣化。
- (d) 由于诸如液晶显示屏 (LCD) 和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣 (如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (g) 本产品的任何正常老化, 尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置 (如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等)、以及
- (h) 本产品表面包括液晶显示屏 (LCD) 表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务, 原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商, 并且预付运费, 承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时, 原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限, 将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后, 任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失, 对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性, EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系 (无论是否根据合同) 而造成: 任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害 (包括但不限于: 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失) 以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任, 即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性, 对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

